



## Массажер вакуумный BM-03 «АКСИОН»

Широко применяется для лечения остеохондроза и обусловленных им заболеваний периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Применяется в клиниках, поликлиниках, санаториях, физиотерапевтических и массажных кабинетах.



### УДОБСТВО В УПРАВЛЕНИИ

- лаконичная панель управления
- световая индикация всех параметров импульса разряда и режимов работы

### ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



### КОМПАКТНЫЙ И ЛЕГКИЙ

### ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗМЕРНОГО РАЗРЕЖЕНИЯ

- при превышении уровня —  $69 \pm 3$  кПа

### ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ВЫБОРА СКОРОСТИ

- спада и подъема разрежения
- степени разрежения - от -5 до -65 кПа

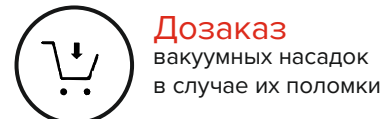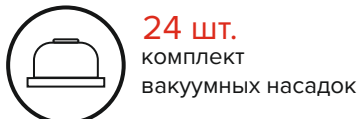

- Возможность работы в двух режимах: «Подготовка» (задание параметров разрежения в вакуумных насадках) и «Работа» (автоматическое выполнение процедуры)
- Наличие индикации всех параметров импульсов разрежения и режимов работы
- Наличие широкого выбора скорости спада и подъема разрежения
- Наличие защиты от чрезмерного разрежения
- Возможность проведения вакуумного массажа на участках тела



Характеристики	Параметры
<b>Основные</b>	
Режим работы	повторно-кратковременный, не более 30 мин.
Диапазон измерения разрежения	от -5 до -65 кПа
Время выдержки на минимальном и максимальном уровнях разрежения	до 9 сек
Количество вакуумных насадок	24 шт
<b>Питание</b>	
Питание от сети переменного тока	220 В ± 22 В / 50 Гц
Потребляемая мощность	не более 200 ВА
<b>Размеры</b>	
Габариты	270x300x260 мм
Масса прибора	не более 12 кг

### Комплектация:

- воздуховоды – 8 шт.
- кабель сетевой – 1 шт.
- насадки вакуумные – 6 шт.
- насадки вакуумные ВН – 18 шт.
- амортизаторы – 4 шт.
- кольца – 4 шт.
- вставка плавкая ВП 1-1 1,0А – 4 шт.
- переходник – 4 шт.
- трубка медицинская поливинилхлоридная ПМ-1/42 4,0x1,0 – 4 шт.
- руководство по эксплуатации

