

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Кожная пластика

amd-med.ru



Дерматом

В комплект входит насадка дерматом, мотор-редуктор, блок питания и 5 ножей соответствующего диаметра.

Технические характеристики набора

1. Толщина срезаемого слоя кожи, мм	0,1...1,0
2. Ширина срезаемого слоя кожи, мм	согласно выбранной насадке
3. Диаметр дискового ножа, мм	согласно выбранной насадке
4. Цена деления механизма регулирования толщины срезаемого слоя, мм	0,1
5. Режим работы повторно-кратковременный: продолжительность цикла в мин продолжительность работы в течение цикла, мин	20 15
6. Частота вращения ножа, с-1 (об/мин)	0,3...16,7 (20...1000) 0,3...11,3 (20...680)
7. Масса, кг, не более: насадка электропривод блок питания	согласно выбранной насадке 0,65 2,5
8. Напряжение питающей сети, В: на входе блока питания на выходе блока питания	220 27
9. Полная потребляемая мощность, Вт, не более	200
10. Изменение скорости вращения электродвигателя, подключаемого к блоку питания	плавное



Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях могут быть допущены опечатки.



КОЖНАЯ ПЛАСТИКА

ЭЛЕКТРОДЕРМАТОМЫ

ДЭ 100-01

В комплект входит насадка ДЭ 100-01 и пять ножей соответствующего диаметра

Технические характеристики

1. Толщина срезаемого слоя кожи, мм	0,1...1,0
2. Ширина срезаемого слоя кожи, мм	до 85
3. Диаметр дискового ножа, мм	102
4. Цена деления механизма регулирования толщины срезаемого слоя, мм	0,1
5. Масса, кг, не более: насадка	0,90

ДЭ 60-01

В комплект входит насадка ДЭ 60-01 и 5 ножей соответствующего диаметра.

Технические характеристики

1. Толщина срезаемого слоя кожи, мм	0,1...1,0
2. Ширина срезаемого слоя кожи, мм	до 50
3. Диаметр дискового ножа, мм	62
4. Цена деления механизма регулирования толщины срезаемого слоя, мм	0,1
5. Масса, кг, не более: насадка	0,70

ДЭ 60-01



ДЭ 100-01



Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях могут быть допущены опечатки.



КОЖНАЯ ПЛАСТИКА

ЭЛЕКТРОДЕРМАТОМЫ

ДЭ 40-01

В комплект входит насадка ДЭ 40-01 и 5 ножей соответствующего диаметра.

Технические характеристики

1. Толщина срезаемого слоя кожи, мм	0,1...1,0
2. Ширина срезаемого слоя кожи, мм	до 32
3. Диаметр дискового ножа, мм	42
4. Цена деления механизма регулирования толщины срезаемого слоя, мм	0,1
5. Масса, кг, не более: насадка	0,65

ДЭ 25-01

В комплект входит насадка ДЭ 25-01 и 5 ножей соответствующего диаметра.

Технические характеристики

1. Толщина срезаемого слоя кожи, мм	0,1...1,0
2. Ширина срезаемого слоя кожи, мм	до 20
3. Диаметр дискового ножа, мм	26
4. Цена деления механизма регулирования толщины срезаемого слоя, мм	0,1
5. Масса, кг, не более: насадка	0,45

ДЭ 40-01



ДЭ 25-01

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях могут быть допущены опечатки.



КОЖНАЯ ПЛАСТИКА

ПЕРФОРАТОРЫ КОЖНЫХ ТРАНСПЛАНТАТОВ

ПЕРФОРАТОРЫ КОЖНЫХ ТРАНСПЛАНТАТОВ


Перфораторы предназначены для нанесения на кожные лоскуты или временные раневые покрытия множественных сквозных разрезов (перфораций), расположенных в шахматном порядке, что позволяет увеличить площадь кожных трансплантатов.

Технические характеристики

Модель	ПМР4-2	ПМР4-4	ПМР4-6
Толщина обрабатываемого лоскута, мм	0,1...1,5		
Ширина обрабатываемого лоскута, мм	до 90		
Длина обрабатываемого лоскута, мм	Не ограничена		
Коэффициент пластики	1 : 2	1 : 4	1 : 6
Габаритные размеры, мм, не более	190x160x80		
Масса, кг, не более:			
с деталями корпуса из сплава алюминия	3		
с деталями корпуса из нержавеющей стали	3,7		
Срок службы при интенсивной эксплуатации 3 цикла в день, лет, не менее	5		

- Ширина используемых кожных трансплантатов - до 90 мм.
- Толщина используемых кожных трансплантатов - 0,1-1,5 мм.
- Длина используемых кожных трансплантатов не ограничена.
- Коэффициент пластики 1:2, 1:4, 1:6 (по желанию заказчика).

Перфораторы оснащены съемной гребенкой, выполненной в виде эксцентрических пластин на одной оси с ножами перфоратора, что позволяет обеспечить атравматическое снятие трансплантата с ножей.

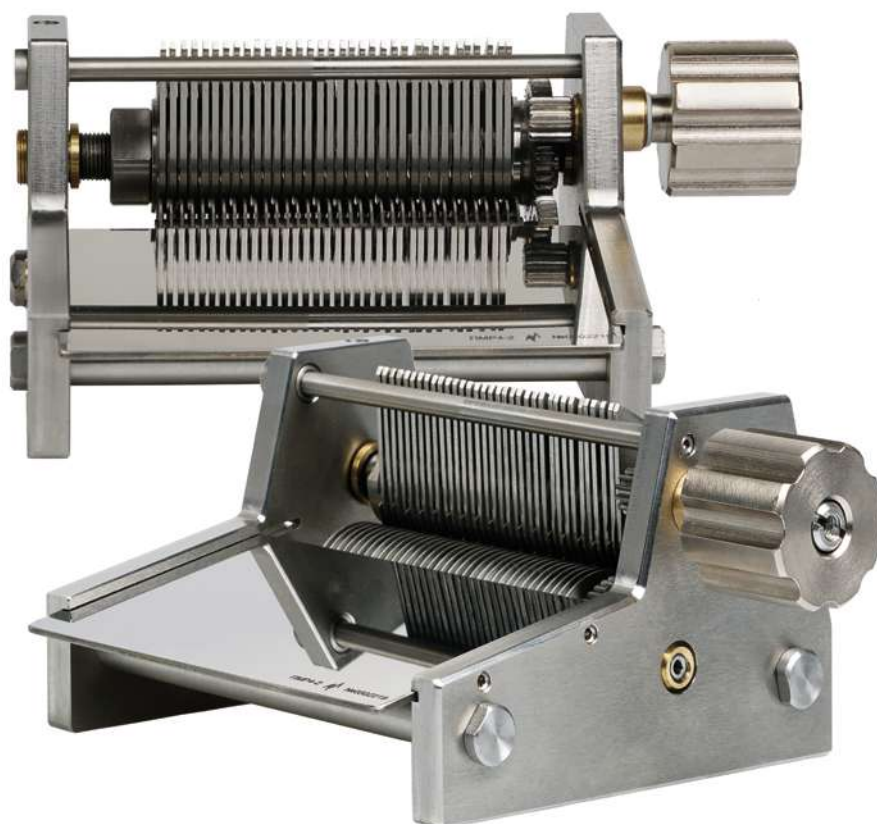

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях могут быть допущены опечатки.



ООО "АМД"

8 (812) 250-50-45

info@amd-med.ru

amd-med.ru

