


УВТ-Мед ТеКо

Высокоэффективная терапия для быстрого лечебного эффекта

Экстракорпоральная ударно-волновая терапия - современная неинвазивная технология, которая успешно используется во многих областях медицины для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата.



Установка для ударно-волновой терапии **УВТ-Мед ТеКо**

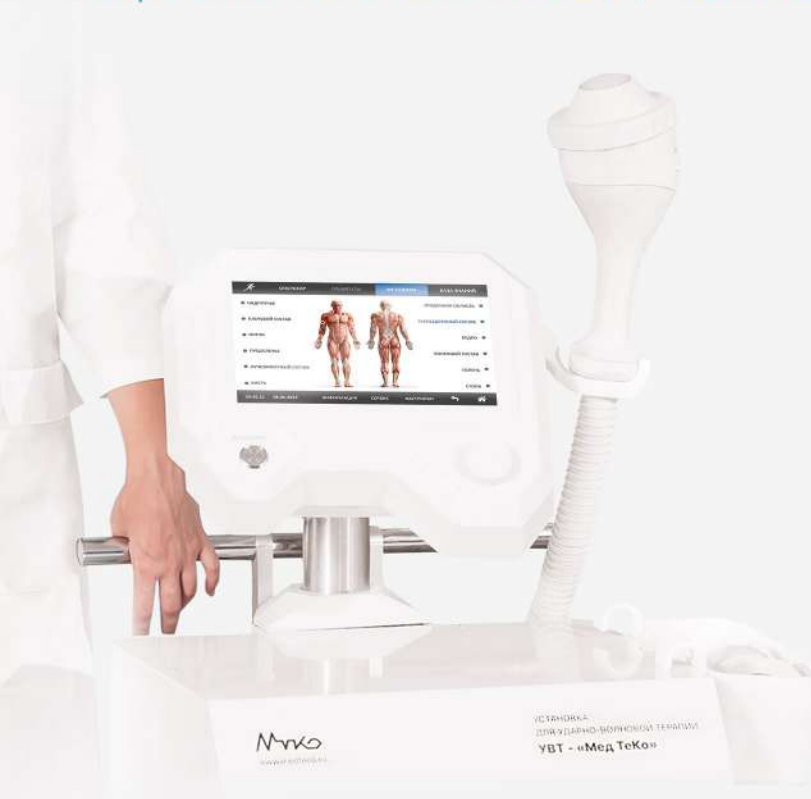

УВТ-терапия широко применяется в реабилитации, ортопедии, травматологии, спортивной медицине. Область использования также включает неврологию, урологию, дерматологию и косметологию.

Высокая результативность процедуры достигается за счет направленного воздействия акустических ударных волн, которые активизируют процессы регенерации, стимулируют восстановление в тканях, уменьшают боль и отечность.

Процедура неинвазивная и абсолютно безопасна, не повреждает нецелевые ткани, поэтому лечение протекает комфортно, не вызывает выраженной боли и осложнений.

Лечебный эффект можно отследить в течение 2-3 процедур и скорректировать тактику проведения УВТ-терапии в зависимости от достигнутых результатов воздействия.

После процедуры УВТ нет ограничений – можно сразу идти на работу, вести привычный образ жизни. Терапия носит долгосрочный характер и имеет высокую эффективность. При лечении ряда заболеваний она достигает 95%.



УВТ-Мед ТеКо

аппарат для ударно-волновой терапии

Оперативное лечение
без хирургического
вмешательства

Теперь доступна
услуга апробации
оборудования

Описание и технические характеристики

Тип ударной волны - фокусирующая
Принцип генерации ударной волны - электромагнитный
Диапазон частот ударной волны - от 1 до 8 Гц
Плотность энергии ударных волн - 0,01-0,55 мДж/мм²
Глубина терапевтического эффекта - до 120 мм
Питание - 220 В, 50 Гц, 700 ВА
Габариты - 1095x545x478 мм
Масса с комплектом поставки - 56 кг

Дисплей

Цветной сенсорный дисплей 10"
Удобное меню на русском языке
Простая навигация, встроенные программы лечения

Аппликатор

3 насадки для регулировки фокусного расстояния
Кнопки управления выведены на аппликатор
Размер фокуса 5x5x30 мм, фокусное расстояние 45/30/15 мм
Сменный аппликатор фокусирующей ударной волны,
ресурс 1,5 млн ударных волн

Преимущества аппарата нового поколения **УВТ-Мед ТеКо**

- 1 | Эргономичный аппликатор с кнопками для удобного автономного управления. Генерирует ударную волну с максимальной глубиной воздействия до 120 мм
- 2 | Гибкая настройка интенсивности электромагнитного излучателя для улучшения переносимости процедуры пациентами с низким болевым порогом
- 3 | Все важные параметры ударной волны во время процедуры отражаются на дисплее. Предусмотрена возможность ведения электронных карт болезни пациента
- 4 | Интерактивный дисплей упрощает работу специалиста. Можно использовать встроенные стандартные программы или создавать собственные методики лечения

