



# Мешки АМБУ TOPMED (Системы дыхательные реанимационные).


ДОСТУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА.

## Уважаемые партнеры!

Компания TOPMED предлагает Российскому рынку новые продукты под собственным брендом — мешки АМБУ TOPMED в различных комплектациях:

- **базовые:** одноразовые / многоразовые;
- **специализированные:** с РЕЕР-клапаном / с манометром.

Широкая представленность модельного ряда одноразовых мешков типа АМБУ обусловлена смещением тренда медицинского потребления в условиях пандемии.

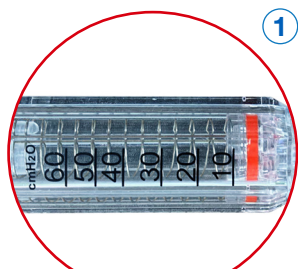


арт. 9104-21-16PM

**Манометр** предназначен для контроля давления в дыхательных путях на вдохе в условиях применения при нестандартном атмосферном давлении.




арт. 9104-21-16VD

**РЕЕР-клапан** предназначен для проведения ручной вентиляции легких с положительным давлением в конце выдоха у пациентов со сниженным объемом легких вследствие органических и функциональных заболеваний паренхимы легких или снижения числа функционирующих альвеол.

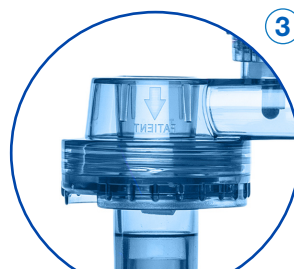

ВО ВСЕХ СИСТЕМАХ

**Клапан пациента** – однонаправленный, обеспечивает вдох пациента из мешка и выдох в окружающую среду.

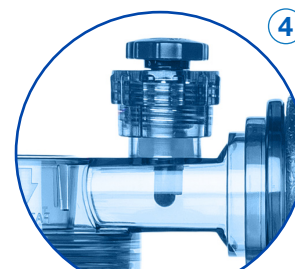

ВО ВСЕХ СИСТЕМАХ

**Клапан ограничения давления** – регулирует давление газовой смеси на вдохе, предотвращая баротравму легких.



### Прозрачная анестезиологическая маска:

а) Для одноразового – с герметичной раздувной манжетой;  
б) Для многоразового – силиконовая автоклавируемая с открытой манжетой.

**Дыхательный мешок** – саморасправляющийся, имеет противоскользкую текстурированную поверхность, компактно складывается в «транспортное» положение.

**Резервуарный мешок** – служит для повышения содержания кислорода в дыхательной смеси.

**Кислородная трубка** – для присоединения к источнику кислорода, имеет продольное армирование, устойчива к пережатию и перегибам.

ДОСТУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ПРОДУКЦИИ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА

NON-AUTOCLEAVABLE  
RESERVOIRBAG 2900 ML

## Мешки АМБУ TOPMED (система дыхательная реанимационная)

### Состав:

• дыхательный мешок	• кислородная трубка
• блок клапанов пациента	• бокс
• анестезиологическая маска	• РЕЕР-клапан (компл. 9104-21-16VD)
• резервуарный мешок	• манометр (компл. 9104-21-16PM)

### Комплектации мешков АМБУ TOPMED

Артикул	Наименование	Материал дыхат. мешка	Объем дыхат. мешка	Клапан огранич. давлен., длина	Объем резервуарного мешка	Маска анестез., размер	Доп. модификации	Упаковка
<b>БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>								
9104-20-16	Мешок АМБУ TOPMED-1600, одноразовый, взрослый	ПВХ	1 600 мл	60 см	2 900 мл	размер 5	-	пакет
9104-21-16	Мешок АМБУ TOPMED-1600В, одноразовый, взрослый	ПВХ	1 600 мл	60 см	2 900 мл	размер 5	-	бокс
9104-21-55	Мешок АМБУ TOPMED-550В, одноразовый, одноразовая, детский	ПВХ	550 мл	40 см	2 900 мл	размер 3	-	бокс
9104-21-35	Мешок АМБУ TOPMED-350В, однораз., неонатальный	ПВХ	350 мл	40 см	810 мл	размер 1	-	бокс
9104-11-16	Мешок АМБУ TOPMED-1600В, многораз., взрослый	Силикон	1 600 мл	60 см	2 900 мл	размер 5	-	бокс
<b>СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>								
9104-21-16 VD	Мешок АМБУ TOPMED-1600В, одноразовый, взрослый, с РЕЕР-клапаном	ПВХ	1 600 мл	60 см	2 900 мл	размер 5	РЕЕР-клапан	бокс
9104-21-16 PM	Мешок АМБУ TOPMED-1600В, одноразовый, взрослый, с манометром	ПВХ	1 600 мл	60 см	2 900 мл	размер 5	манометр	бокс

### Можем поставить с сопутствующими товарами:

арт. 9105-01-00



#### Маска для сердечно-легочной реанимации TOPMED

Предназначена для проведения сердечно-легочной реанимации в условиях экстренного оказания медицинской помощи.

- многоразовая
- комплектация: маска 1 шт., клапан 1 шт., эластичная лента 1 шт., инструкция 1 шт.
- упаковка: жесткий футляр

арт. 9105-01-01



#### Клапан нереверсивный для маски СЛР TOPMED

Клапан односторонний для вентиляции пациента по методу «рот-в-рот». Применяется с лицевой маской для сердечно-легочной реанимации.

- одноразовый
- комплектация: клапан 5 шт.
- упаковка: пакет

**ООО «АМД»**

Оснащение медицинских учреждений

**8 (812) 250-50-45** info@amd-med.ru

www.amd-med.ru